



DEV-LUX INSTRUMENTE

DEV-LUX INSTRUMENTS
INSTRUMENTS DEV-LUX



Direkte und kontrollierte Kraftübertragung
Direct and controlled power transfer
Transmission directe et contrôlée de la puissance



Erhaltung von Hart- und Weichgewebe
Saving hard and soft tissue
Préservation des tissus durs et mous



Taktiler Arbeiten
Tactile working
Travail tactile



Moderne Zahnextraktion
Modern tooth extraction
L'extraction dentaire moderne



Mit den dev-lux-Instrumenten erhalten Sie ein modernes Instrumentarium für die Zahnextraktion, nach dem Prinzip der Minimalinvasivität.

Heutzutage steht die Implantologie immer mehr im Mittelpunkt der modernen Zahnheilkunde. Hierbei ist es notwendig hart- und weichgewebige Strukturen schon bei der Extraktion zu schonen. Hierfür wurden die dev-lux-Instrumente entwickelt.

Das neue Griffdesign **F-line** ROUND SOLID, auf Druck und Zug ausgerichtet, ermöglicht ein taktiler Arbeiten ohne angrenzende Strukturen zu zerstören. Mit dem neuen Griff ist eine direkte und kontrollierte Kraftübertragung möglich.

Für die schonende und einwandfreie Entfernung nicht erhaltungsfähiger Zähne ist dies das perfekte Instrumentarium.



With the dev-lux-range you get a modern set of instruments for dental extraction, appropriate for the principle of minimal invasiveness.

Increasingly today, the focus in modern dentistry is on implantology. Therefore it is necessary to conserve the hard and soft tissue during extraction. The dev-lux-instruments have been developed with this in mind.

The new, handle design **F-line** ROUND SOLID, aligned to pressure and tug, allows tactile working without destroying the adjacent structures. Direct and controlled power transfer is possible with the new handle.

This is the perfect instrument for the careful and faultless removal of non-preserved teeth.



Avec nos instruments dev-lux vous obtenez une instrumentation pour l'extraction moderne selon le principe de la chirurgie invasive minimisée.

De nos jours le centre de la chirurgie dentaire moderne est l'implantologie. Pour cette raison il est important de manipuler les tissus gingivaux mous et durs de manière douce. Pour cela nous avons développé nos instruments dev-lux.

Le nouveau design du manche **F-line** ROUND SOLID permet un travail tactile sans blesser les zones proximales. Le nouveau manche permet une transmission de force directe et contrôlée.

Ces instruments sont parfaits pour une avulsion en douceur des dents endommagées.

DEV-LUX INSTRUMENTE - ANWENDUNG

DEV-LUX INSTRUMENTS - USAGE

INSTRUMENTS DEV-LUX - UTILISATION



753-05 F ■ Desmotom „Bernard“



753-10 F ■ Bereich: distal
Area: distal
Zone: distale



753-15 F ■ Bereich: mesial
Area: mesial
Zone: mesiale



753-31 F ■ Bereich: approximal (mesial, distal)
753-33 F ■ Area: approximal (mesial, distal)
Zone: approximal (mesial, distal)



753-41 F ■ zum Lösen des Zahnes
753-43 F ■ for loosening of the tooth
un relachement souple de la dent



Nicht für den axial-hebelnden Gebrauch geeignet.
Not suitable for use as axial levers.
Ne pas utiliser comme levier axial.

Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise kann zum Bruch führen. Für diese Schäden können wir keine Haftung übernehmen!
Disregard of the usage instructions may result in breakage. We can accept no liability for this damage!
Un non-respect des instructions peut provoquer la fracture de l'instrument. Pour ces dommages nous ne prenons aucune responsabilité!



DEV-LUX INSTRUMENTE

DEV-LUX INSTRUMENTS
INSTRUMENTS DEV-LUX

753-05 F

F-line

Desmotom "Bernard" | 173 mm

4.0 mm




753-11 F

F-line

173 mm

Distal / Desmotom
Distal / Desmotom
Distale / Desmotom

3.0 mm

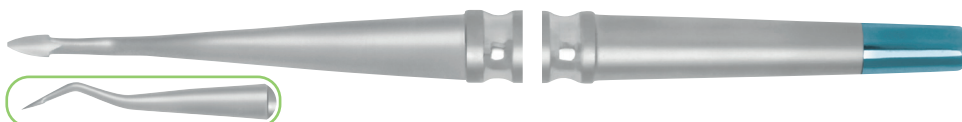

753-16 F

F-line

173 mm

Mesial / Desmotom
Mesial / Desmotom
Mesiale / Desmotom

3.0 mm



753-10 F

F-line

173 mm

Distal / Desmotom
Distal / Desmotom
Distale / Desmotom

2.5 mm



753-15 F

F-line

173 mm

Mesial / Desmotom
Mesial / Desmotom
Mesiale / Desmotom

2.5 mm



DEV-LUX INSTRUMENTE

DEV-LUX INSTRUMENTS
INSTRUMENTS DEV-LUX

753-31 F

F-line

173 mm

Approximal (mesial/distal)
Approximal (mesial/distal)
Approximal (mesiale/distale)

2.5 mm



753-33 F

F-line

173 mm

Approximal (mesial/distal)
Approximal (mesial/distal)
Approximal (mesiale/distale)

3.0 mm



753-41 F

F-line

173 mm

zum Lösen des Zahnes
for loosening of the tooth
un relachement souple de la dent

2.5 mm



753-43 F

F-line

173 mm

zum Lösen des Zahnes
for loosening of the tooth
un relachement souple de la dent

3.0 mm



dev-lux Instrumente sollten regelmäßig (nach 5-6 Anwendungen) nachgeschliffen werden. Optimal dafür: Schleifsteine 9500-60 und 9500-30 (Kapitel C)

dev-lux instruments should be sharpened regularly (after 5-6 applications). Particularly suitable: abrasive 9500-60 and 9500-30 (Chapter C)


Les instruments dev-lux doivent être régulièrement réaffûtés (après 5-6 utilisations). Nous recommandons : Pierre d'affûtage 9500-60 et 9500-30 (Chapitre C)



DEV-LUX SET - SMALL

DEV-LUX SET - SMALL

DEV-LUX SET - SMALL

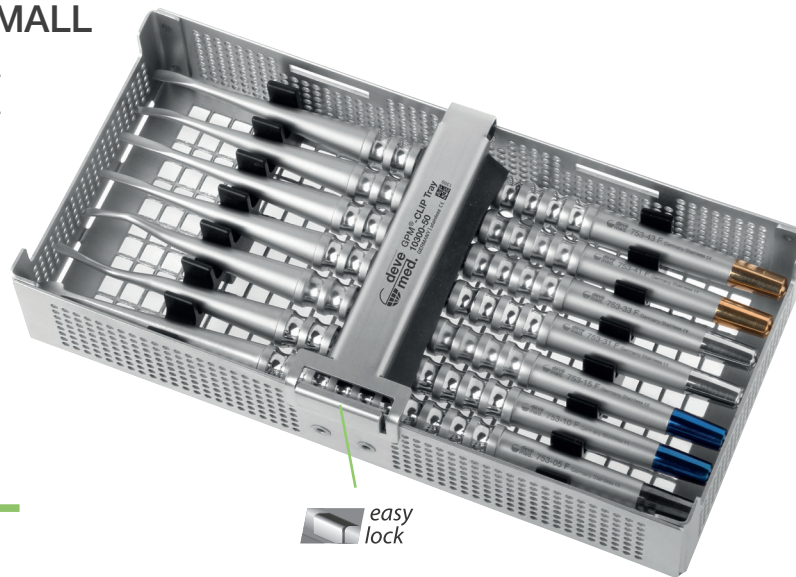


easy
lock

Set 10300-50







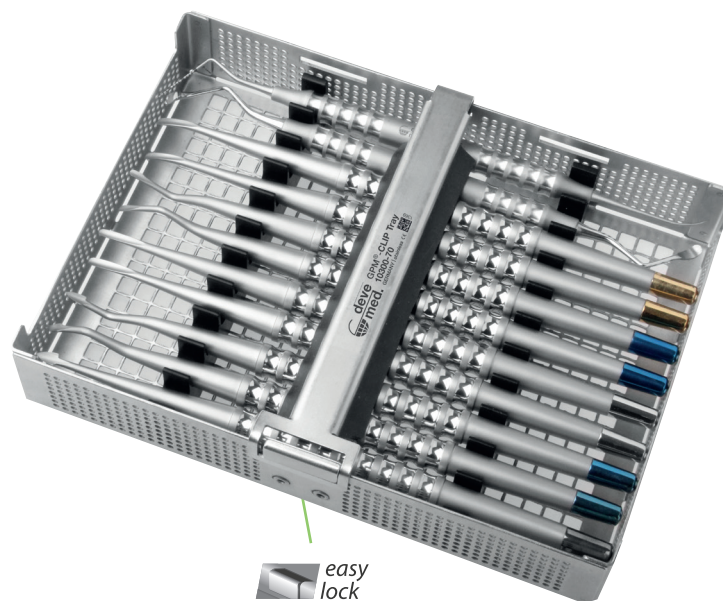





Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10300-50 Item no. of the set: 10300-50 Set complet réf.: 10300-50
753-05 F 	dev-lux Instrument, gerade dev-lux instrument, straight Instrument dev-lux, droits	17.3 cm, 4.0 mm
753-10 F 	dev-lux Instrument, abgewinkelt dev-lux instrument, angulated Instrument dev-lux, angulé	17.3 cm, 2.5 mm
753-15 F 	dev-lux Instrument, abgewinkelt dev-lux instrument, angulated Instrument dev-lux, angulé	17.3 cm, 2.5 mm
753-31 F 	dev-lux Instrument, abgewinkelt dev-lux instrument, angulated Instrument dev-lux, angulé	17.3 cm, 2.5 mm
753-33 F 	dev-lux Instrument, gerade dev-lux instrument, straight Instrument dev-lux, droits	17.3 cm, 3.0 mm
753-41 F 	dev-lux Instrument, gebogen dev-lux instrument, curved Instrument dev-lux, courbé	17.3 cm, 2.5 mm
753-43 F 	dev-lux Instrument, gebogen dev-lux instrument, curved Instrument dev-lux, courbé	17.3 cm, 3.0 mm
9200-70 	GPM CLIP Wash Tray	177.5 x 84.5 x 33.0 mm

DEV-LUX SET - LARGE

DEV-LUX SET - LARGE
DEV-LUX SET - LARGE



Set 10300-70

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10300-70 Item no. of the set: 10300-70 Set complet réf.: 10300-70
753-05 F 	dev-lux Instrument, gerade dev-lux instrument, straight Instrument dev-lux, droits	17.3 cm, 4.0 mm
753-10 F 	dev-lux Instrument, abgewinkelt dev-lux instrument, angulated Instrument dev-lux, angulé	17.3 cm, 2.5 mm
753-11 F 	dev-lux Instrument, abgewinkelt dev-lux instrument, angulated Instrument dev-lux, angulé	17.3 cm, 3.0 mm
753-15 F 	dev-lux Instrument, abgewinkelt dev-lux instrument, angulated Instrument dev-lux, angulé	17.3 cm, 2.5 mm
753-16 F 	dev-lux Instrument, abgewinkelt dev-lux instrument, angulated Instrument dev-lux, angulé	17.3 cm, 3.0 mm
753-31 F 	dev-lux Instrument, abgewinkelt dev-lux instrument, angulated Instrument dev-lux, angulé	17.3 cm, 2.5 mm
753-33 F 	dev-lux Instrument, gerade dev-lux instrument, straight Instrument dev-lux, droits	17.3 cm, 3.0 mm
753-41 F 	dev-lux Instrument, gebogen dev-lux instrument, curved Instrument dev-lux, courbé	17.3 cm, 2.5 mm
753-43 F 	dev-lux Instrument, gebogen dev-lux instrument, curved Instrument dev-lux, courbé	17.3 cm, 3.0 mm
920-33 F 	Knochenkürette „Lucas # 3R-3L“ Bone curette „Lucas # 3R-3L“ Curette chirurgicales „Lucas # 3R-3L“	17.3 cm, 3.8 / 3.8 mm
2525-10 F 	Parodontometer # EX3A/CP15 Periodontal probe # EX3A/CP15 Sonde paradontale # EX3A/CP15	17.3 cm, graduert 17.3 cm, graduated 17.3 cm, graduation
9200-80 	GPM CLIP Wash Tray	177,5 x 84,5 x 33,0 mm




devemed GmbH


take-off GewerbePark 30
78579 Neuhausen ob Eck
Germany

Tel: +49 (0) 74 67 - 949 199 0
info@devemed.de

www.devemed.de
www.devemed-dental-shop.de

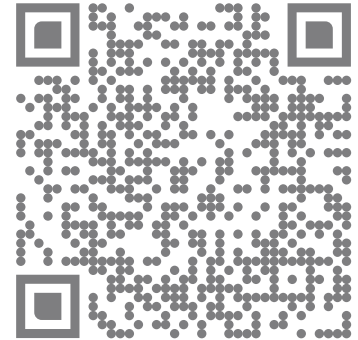

BASIC Catalogue

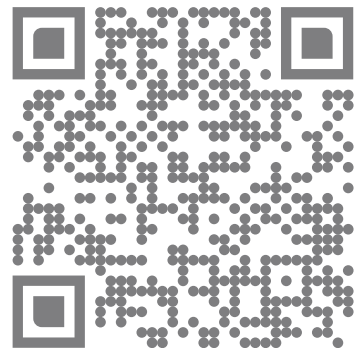

Instructions for use:
<https://ifu.devemed.de>

CE | CE 0483

Rev_05/26

Alle aufgeführten Medizinprodukte sind mit dem CE-Zeichen versehen. Bei Produkten höher Klasse I wird über die Kennzeichnung zusätzlich die Kennnummer 0483 unserer Benannten Stelle ausgewiesen. Bei Medizinprodukten, die wir lediglich handeln, finden Sie auf den entsprechenden Seiten jeweils einen Hinweis.

All listed medical devices bear the CE mark. Products above Class I also bear the identification number 0483 of our notified body. Medical devices that we merely distribute are marked accordingly on the relevant pages.

Tous les dispositifs médicaux mentionnés sont munis du marquage CE. Pour les produits de classe supérieure à I, le numéro d'identification 0483 de notre organisme notifié est également indiqué sur le marquage. Pour les dispositifs médicaux que nous commercialisons uniquement, vous trouverez une mention correspondante sur les pages correspondantes.